

1 Series

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1 Series es una unidad pequeña y portátil diseñada para el tratamiento de áreas localizadas del cuerpo. Los avances en eficiencia y versatilidad se han conseguido mediante el uso de un nuevo tipo de lámpara con una curva de 180 grados que proporciona la potencia de dos lámparas en el espacio de una. Con solo cuatro lámparas, los dispositivos 1 Series superan a equipos con el doble de lámparas convencionales.



VERSÁTIL

La 1 Series Daavlin está disponible con una amplia variedad de lámparas con diferentes longitudes de onda; lámparas UVA, UVA1, banda estrecha UVB, banda ancha UVB y AD. Debido a que estas lámparas están conectadas eléctricamente en un solo extremo, son muy fáciles de cambiar. Esto significa que con una sola inversión y la compra de una variedad de lámparas diferentes, puedes tener un dispositivo muy versátil a un costo muy bajo.

EFICIENTE


Debido al diseño exclusivo de la lámpara "180°", la cantidad de UV disponible en el área de tratamiento del dispositivo se duplica, lo que se traduce en tiempos de tratamiento más cortos. Estas lámparas emiten más potencia por unidad de energía consumida que las lámparas convencionales, lo que hace que los tiempos de tratamiento sean aún más cortos. Además, las lámparas fluorescentes suelen tener puntos muertos en ambos extremos. Debido al diseño "180" de las lámparas de la 1 Series, la uniformidad de la radiación en los extremos del dispositivo es superior a la de los dispositivos equipados con lámparas convencionales.

CONFORT

La 1 Series Daavlin puede estar plana para que el tratamiento de las manos sea cómodo y fácil. Un protector acrílico de transmisión UV especial cubre y protege las lámparas y proporciona una superficie clara y sin obstáculos para descansar las manos durante los tratamientos.

COMODIDAD

La 1 Series también se puede colocar verticalmente en su extremo o lado para tratar cómodamente la cara u otras áreas localizadas. Siendo extremadamente ligero y portátil, es fácil de mover en el hogar o la oficina y perfecto para viajar.

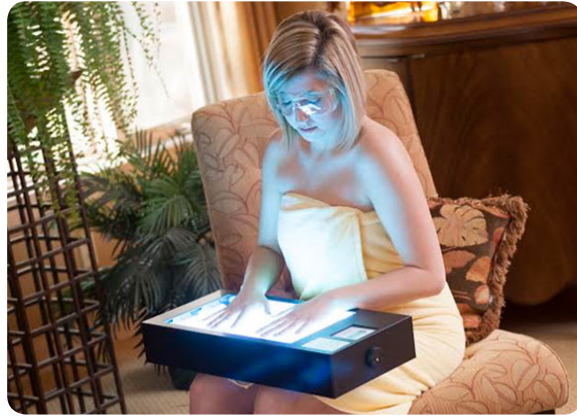

LA TECNOLOGÍA AVANZADA

Balastos ecológicos de “encendido programado” extienden la vida de la lámpara, aumentan la potencia de salida, y dan a la unidad 1 Series Daavlin un costo de operación sumamente bajo.

Debido a que la energía terapéutica disminuye con la distancia de las lámparas, el sistema exclusivo de dosimetría de Punto Doble Daavlin con medidor integrado es una opción que dá exactamente la cantidad correcta de energía, sin importar de qué manera la unidad esté siendo usada. Simplemente seleccione la “ubicación” del tratamiento y el sistema ajusta los tiempos de tratamiento automáticamente.

Alternativamente la unidad puede ser equipada con el cronómetro digital Flex de Daavlin en el cual el tiempo de tratamiento deseado se registra en minutos y segundos.

DETALLES RÁPIDOS

Origen:	Ohio, EEUU
Marca:	Daavlin
UVA:	350nm
UVB NB:	311nm
UVB BB:	305nm
UVA1:	365nm
UVC:	254nm
Lámpara:	4

SERIE 1: DIMENSIONES

Zona de tratamiento	23,5 cm x 45,7 cm
Altura	55,2 cm
Ancho	24,7 cm
Profundidad	8,9 cm
Peso	4,1 kg
110 V-120 V 60Hz o 220-240 V 50Hz/60Hz	