



Premium Hospital Beds

COMBI



## MESAS DE ENFERMERÍA

Ayudas Sanitarias



### Armonía Hospitalaria

Las mesillas de noche y mesas atril Combi están concebidas con un propósito fundamental: compatibilidad con las camas de hospital, sea de enfermería, UCI u otras unidades de salud.

Con diversas características pensadas para complementar las necesidades de los pacientes encamados, la conjugación de las mesas y camas IMO crean ambientes hospitalarios acogedores, generando confort en los pacientes y buenas condiciones de trabajo para los profesionales.

#### 1 Combi

Estructura metálica pintada epoxi, con opciones de acabado para topes y puertas de calidad duradera.

Mesa atril con opción de elevación por cilindro neumático, con curso de elevación de 960-1200 mm.

#### 2 Adapta

Estructura metálica pintada epoxi, con topes, laterales y frentes de laminado fenólico (HPL).

Mesa atril con elevación por cilindro neumático, con curso de elevación de 855-1115 mm.

#### 3 Wally

Estructura metálica, puertas y frentes de cajones en melamina, con topes en ABS.

Mesa atril con sistema de elevación mediante cilindro neumático, con curso de elevación de 775-1025 mm.

## Para Cualquier Situación

Las mesas auxiliares Combi cuentan con combinaciones para todas las situaciones. Desde a simples Mesilla de noche con amplio espacio para ordenación y un portabombonas, a la mesa atril para facilitar las actividades de los encamados, hasta la mesa combinada con espacio portaobjetos y atril.

La gama en su conjunto está pensada para satisfacer las necesidades de pacientes y cuidadores.



## Calidad Transversal

Los mismos parámetros de calidad aplicados a las camas IMO son utilizados para la construcción del resto de productos y componentes.

Esto puede observarse en los opcionales que hay disponibles para las mesas. Desde material fenólico (HPL) hasta material ABS, todos los acabados tienen una finalidad y una situación ideales para utilizar.

**Mesilla  
de Noche**

**Mesilla de Noche  
con Atril**

**Mesa  
Atril**

## Girar

Tablero que gira 360° sobre un eje en la columna de soporte, con puntos de parada a diversos ángulos. Función usada por el paciente para alejarlo después de usar.




## Elevar

Tablero con recorrido de elevación de 960-1200 mm y palanca de bloqueo a la altura deseada. Usado por el cuidador para mejorar el confort del paciente.




## Extender

Tablero que se desliza hasta 210 mm horizontalmente. Usado para compensar la anchura de la cama y centrar el tablero con el paciente.

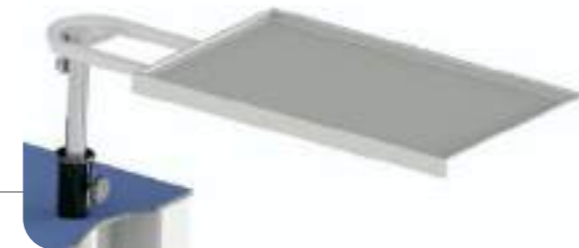

## Reclinar

Tablero que se inclina 20° bilateralmente, con bloqueo horizontal. Usado por el paciente para facilitar la lectura en la cama u otras actividades.

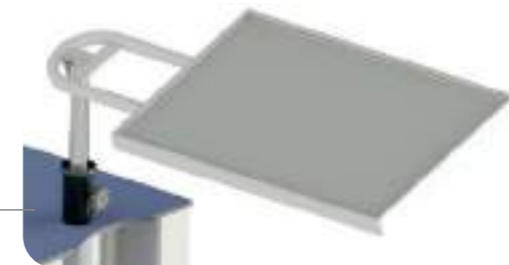

**PROTECCIÓN CONTINUA**  
Entorno Hospitalario



## Movilidad Precoz

Sencilla y ligera, el paciente puede por sí solo acercar la mesilla a la cama fácilmente, ya que no tiene tiradores. La puerta y el cajón abren suavemente por ambos lados, mientras que el portabombonas es igualmente de fácil acceso.

## Control de Infecciones

El diseño simple y minimalista de la Combi facilita las tareas de limpieza. Mientras que las esquinas redondeadas evitan que la suciedad se acumule, el interior tiene un estante extraíble y cubeta de plástico para una limpieza profunda.

## Ruedas de Calidad

Ruedas dobles, 2 con freno local. Opción en nylon de Ø50 mm o ABS de Ø75 mm.



## Protección Contra Daños

Discos suaves de PVC en las esquinas para protección contra posibles impactos.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos 906.1 / 907.3

**Estándar** - característica incluida de serie.  
**Opción** - elija entre varias opciones.  
**Extra** - posible de añadir al modelo.

**Estándar**  
**Opción**  
**Extra**

**Estándar** - característica incluida de serie.  
**Opción** - elija entre varias opciones.  
**Extra** - posible de añadir al modelo.

**Estándar**  
**Opción**  
**Extra**

## Estructura

Cuerpo de metal robusto con acabado epoxi	●	
Puertas y cajones con apertura bilateral	●	
Puertas y cajones de metal con acabado epoxi		●
Puertas y cajones en fenólico (HPL)		●
Cajón con cubeta ABS extraíble	●	
Puertas con cerradura magnética	●	

## Base

Ruedas dobles ABS Ø75 mm, 2 con freno local	●
Ruedas dobles nylon Ø50 mm, 2 con freno local	●
Esquinas protegidas por discos suaves de PVC	●

## Sobres

Topes en melamina		●	
Sobres en fenólico (HPL)		●	
Portabotellas en ABS	●		
Atril en melamina		●	
Atril en ABS		●	
Atril con extensión, rotación y reclinación	●		
Atril con elevación manual		●	
Atril con elevación hidráulica		●	
Atril con bandeja de tajas fija			●

## Acabado

Aluminio blanco (puertas y topes)	●
Blanco señal (estructura y atril)	○
Turquesa menta	●
Haya	●
Azul gentiana	●
Azul paloma	●
Rojo oriental	●
Naranja pastel	●

## Conformidad y Registro

• Certificados bajo la norma EN ISO 9001 - Sistema de Gestión de la Calidad



### MESILLA DE NOCHE CON ATRIL

\* Rueda Ø75mm, tope en HPL

**Dimensiones** +/- 5%

Dimensiones generales	380 x 750 mm
Dimensiones de la tapa	375 x 595 mm
Altura min/max	960/1200* mm
Extensión	210 mm
Inclinación	20°



### MESA ATRIL

\* Rueda Ø75mm, atril de plástico

**Dimensiones** +/- 5%

Longitud	460 mm
Anchura	760 mm
Altura min/max	900/1150* mm
Inclinación	20°



### MESILLA DE NOCHE

\* Rueda Ø75mm, tope en HPL

**Dimensiones** +/- 5%

Longitud	565 mm
Anchura	380 mm
Altura	730* mm


# IMO - Indústrias Metalúrgicas, S.A.

## Central y Planta

Rua Dr. Aurélio Teixeira de Sousa, 575  
4650-312 Rande Portugal  
T. +351 255 340 220  
sede@imo.com.pt

## Showroom

Av. Defensores de Chaves, 87A  
1000-115 Lisboa Portugal  
T. +351 217 963 478  
lisboa@imo.com.pt

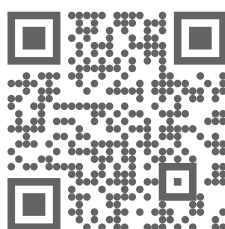

[www.imo.com.pt](http://www.imo.com.pt)