



Premium Hospital Beds

ADAPTA



MESAS DE ENFERMERÍA

Ayudas Sanitarias



Armonía Hospitalaria

Las mesillas de noche y mesas atril Adapta están concebidas con un propósito fundamental: compatibilidad con las camas de hospital, sea de enfermería, UCI u otras unidades de salud.

Con diversas características pensadas para complementar las necesidades de los pacientes encamados, la conjugación de las mesas y camas IMO crean ambientes hospitalarios acogedores, generando confort en los pacientes y buenas condiciones de trabajo para los profesionales.

1 Combi

Estructura metálica pintada epoxi, con opciones de acabado para topes y puertas de calidad duradera.

Mesa atril con opción de elevación por cilindro neumático, con curso de elevación de 960-1200 mm.

2 Adapta

Estructura metálica pintada epoxi, con topes, laterales y frentes de laminado fenólico (HPL).

Mesa atril con elevación por cilindro neumático, con curso de elevación de 855-1115 mm.

3 Wally

Estructura metálica, puertas y frentes de cajones en melamina, con topes en ABS.

Mesa atril con sistema de elevación mediante cilindro neumático, con curso de elevación de 775-1025 mm.

Compacta y Práctica

Como el propio nombre indica, el modelo Adapta es una mesa que destaca por su adaptabilidad a cualquier espacio. Extremadamente compacta, esta mesa puede acoplarse a cualquier espacio reducido, sin renunciar en ningún momento a las funciones de una mesa de lecho de alta calidad.

La Adapta está concebida como un todo para satisfacer las necesidades de pacientes y cuidadores en cualquier situación de hospital.



Elevar

Abatir

Reclinar

Extender

Regulación con Una Mano

Los mismos parámetros de calidad aplicados a las camas IMO son utilizados para la construcción del resto de productos y componentes.

Esto se puede observar al manipular el modelo Adapta, con un desplazamiento suave y un tablero fácilmente ajustable.

Abatir

Tablero que se abate verticalmente con una sola mano. Se puede guardar cuando no se usa.




Elevar

Tablero con recorrido de elevación de 855-1115 mm y palanca de bloqueo a la altura deseada. Usado por el cuidador para mejorar el confort del paciente.




Extender

Tablero que se desliza hasta 160 mm horizontalmente. Usado para compensar la anchura de la cama y centrar el tablero con el paciente.

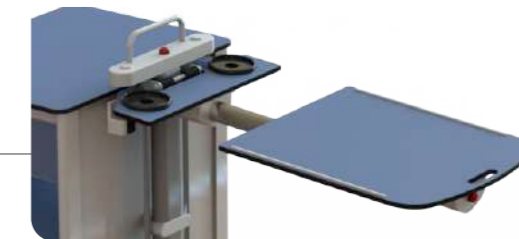

Reclinar

Tablero que se inclina 35° bilateralmente, con bloqueo horizontal. Usado por el paciente para facilitar la lectura en la cama u otras actividades.

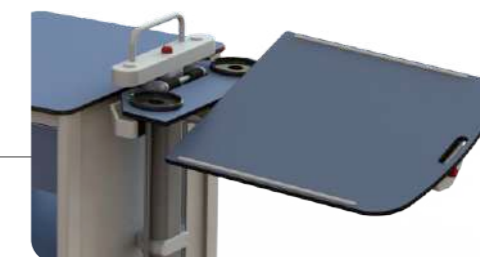

PROTECCIÓN CONTINUA
Entorno Hospitalario



Movilidad Precoz


La quinta rueda de perfil bajo permite encajar fácilmente la mesilla de noche con atril Adapta bajo la cama. Además, el portavasos, independiente de la inclinación del tablero, aumenta el confort.

Control de Infecciones

Sin esquinas con difícil acceso para evitar la acumulación de suciedad y el interior con un estante y una cubeta de plástico, ambos desmontables, permitiendo una limpieza profunda.

Ruedas de Calidad

Ruedas dobles en nylon. 4 de Ø65 mm con freno local y 5ª rueda de Ø50 mm.

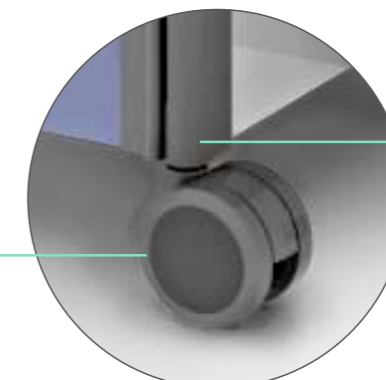

Protección Contra Daños

Esquinas con perfiles en toda su longitud para protección contra golpes leves.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos 906.1 / 907.3

Estándar - característica incluida de serie.
Opción - elija entre varias opciones.
Extra - posible de añadir al modelo.

Estándar
Opción
Extra

Estándar - característica incluida de serie.
Opción - elija entre varias opciones.
Extra - posible de añadir al modelo.

Estándar
Opción
Extra

Estructura

Cuerpo de metal ancho con acabado epoxi	●
Cuerpo de metal estrecho con acabado epoxi	●
Esquinas con perfiles de protección	●
Puertas y cajones con apertura bilateral	●
Puertas y cajones en fenólico (HPL)	●
Tiradores de acero inoxidable de bajo perfil	●
Cajón con cubeta extraíble en ABS	●
Puertas con cerradura magnética	●
Estante extraíble en fenólico (HPL)	●

Base

Ruedas dobles nylon Ø65 mm, 2 con freno local	●
5ª rueda doble nylon Ø50 mm	●

Acabado

Aluminio blanco (puertas, topes y atril)	●
Blanco señal (estructura)	○
Turquesa menta	●
Haya	●
Azul gentiana	●
Azul paloma	●
Rojo oriental	●
Naranja pastel	●

Sobres

Topes en fenólico (HPL)	●
Portabotellas interior	●
Atril en fenólico (HPL)	●
Atril abatible para almacenamiento	●
Atril con elevación hidráulica	●
Atril con extensión y reclinación	●
Atril con bandeja de tajas fija	●

Conformidad y Registro

• Certificados bajo la norma EN ISO 9001 - Sistema de Gestión de la Calidad

MESILLA DE NOCHE CON ATRIL



Modelo Ancho

Dimensiones +/- 5%

Longitud	440 mm
Anchura	420 mm
Altura	850 mm

Modelo Estrecho

Dimensiones +/- 5%

Longitud	450 mm
Anchura	334 mm
Altura	850 mm

Atril

Dimensiones +/- 5%

Longitud	600 mm
Anchura	360 mm
Altura min/max	855 / 1115 mm
Extensión	160 mm
Inclinación	35°


IMO - Indústrias Metalúrgicas, S.A.

Central y Planta

Rua Dr. Aurélio Teixeira de Sousa, 575
4650-312 Rande Portugal
T. +351 255 340 220
sede@imo.com.pt

Showroom

Av. Defensores de Chaves, 87A
1000-115 Lisboa Portugal
T. +351 217 963 478
lisboa@imo.com.pt

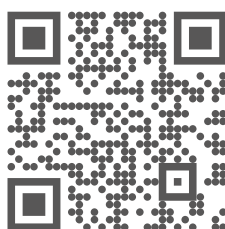

www.imo.com.pt