

DIASYS

FÁCIL DE USAR

La lámpara Diasys se acciona automáticamente al detectar el movimiento, sin necesidad de interruptor. Al final del procedimiento médico la luz debe ser orientada hacia el techo para que se apague automáticamente.

AHORRO DE ENERGÍA

Gracias a la tecnología Motion-Matic la lámpara se apagará automáticamente luego de 30 minutos sin registrar movimiento. Diasys está orientada a un desarrollo ecológico y sostenible.

AJUSTE DE LUZ

El ajuste de la intensidad de la luz se logra con un simple movimiento de la mano sin tocar la cúpula.

DISEÑO METICULOSO


Fabricada con un innovador poliéster específicamente diseñado para satisfacer las limitaciones del ambiente hospitalario:

- Resistencia a los productos de desinfección.
- Excelente amortiguación.
- No amarillea con el tiempo.
- Resistencia al fuego y al calor (índice 5VA).
- Diasys es una lámpara quirúrgica portátil compuesta por un módulo de 4 LEDs.




CONFIGURACIONES DISPONIBLES


Montaje de techo

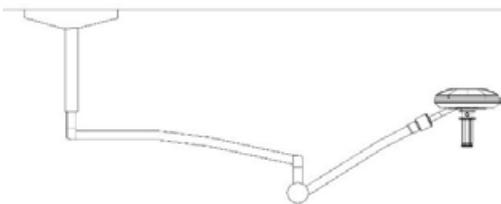


Móvil

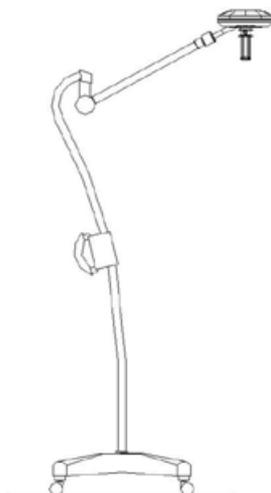

Montaje de pared

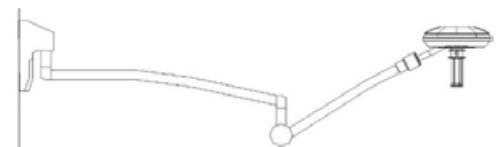

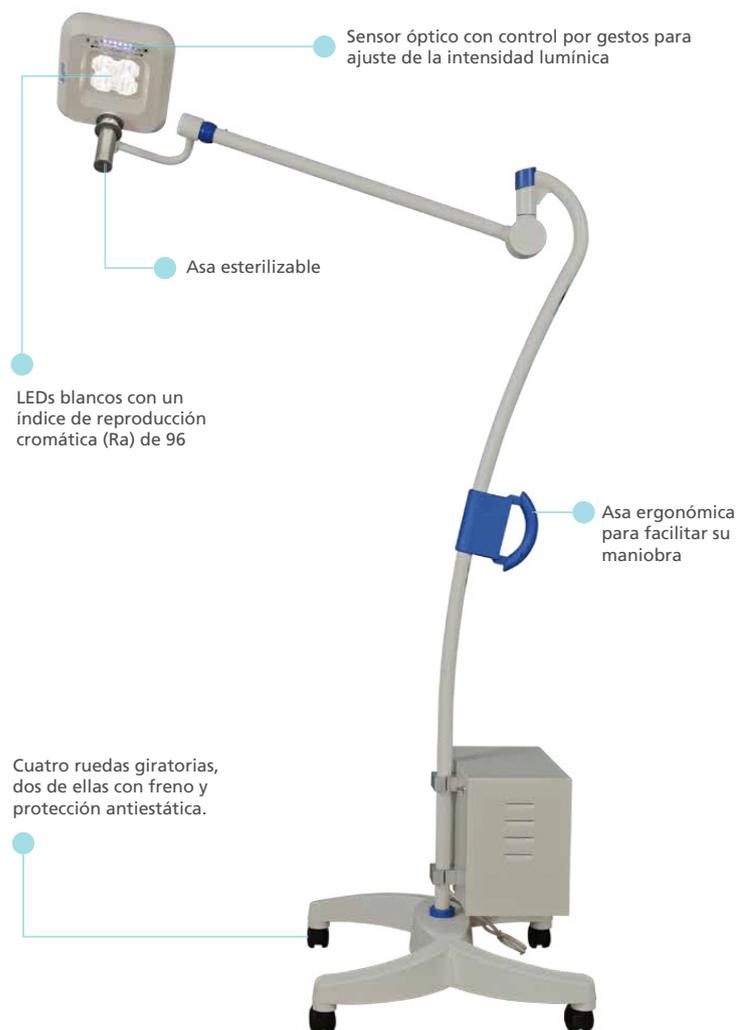

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|--|-------------------------|
| Fuente de luz | LED |
| Iluminación central máxima (Ic)* | 70 000 Lux |
| Variación de intensidad luminosa* | 30 000 Lux - 70 000 Lux |
| Modo endoscopia | No |
| Diámetro fijo de campo | 14 cm |
| Profundidad de campo L1+L2 (60% Ec) 2008 | 131 cm |
| Enfoque | No |
| Índice de reproducción cromática Ra* | 96 |
| R9* | 96 |
| Temperatura de color* | 4 200K |
| Vida útil de los LED | 60 000 h |