



EQUIPAMIENTO

MERIVAARA

MESA DE OPERACIONES

FINLANDIA



MESA DE OPERACIONES - PRACTICO™ ELÉCTRICA

Diseñado para mejorar la ergonomía con la gama más amplia de posturas de la industria.
Impulsado por controles inteligentes que lo ayudan a trabajar con mayor fluidez.
Health Technology with a Human Touch

Descripción

Ergonomía mejorada

Múltiples opciones de altura de columna: *general, baja y alta*.
Fácilmente adaptable a múltiples aplicaciones quirúrgicas.
Enfocado ergonómicamente tanto para el equipo quirúrgico como para el paciente

Seguro y fuerte

Hasta 280 kg en todas las direcciones incluido el tobogán.
Adecuado para cirugía bariátrica con una amplia gama de accesorios.
Capacidad de elevación 460 kg

Accesibilidad fluida

La baja altura de la base permite el acceso del arco en C de 360°.
El diseño de la base curva permite que el cirujano obtenga un acceso más cercano al paciente.
El deslizamiento longitudinal de 390 mm permite una mayor accesibilidad del arco en C, lo que hace posible la obtención de imágenes de rayos X y fluoroscópicas


Control manual inteligente

Interfaz fácil de usar.
Diseño fluido y cómodo de sostener.
Funciones de memoria rápida.
El modo endoscópico garantiza un uso seguro y sencillo en un entorno con poca luz.
Práctico indicador de estado de la batería

Movimientos inteligentes

El sistema de control inteligente de la mesa reconoce posibles situaciones de colisión mecánica.
Múltiples ajustes anticolidión, por ejemplo durante trendelenburg profundo.
El sistema de control realiza automáticamente los movimientos compensatorios correctos para permitir ajustes seguros y suaves.



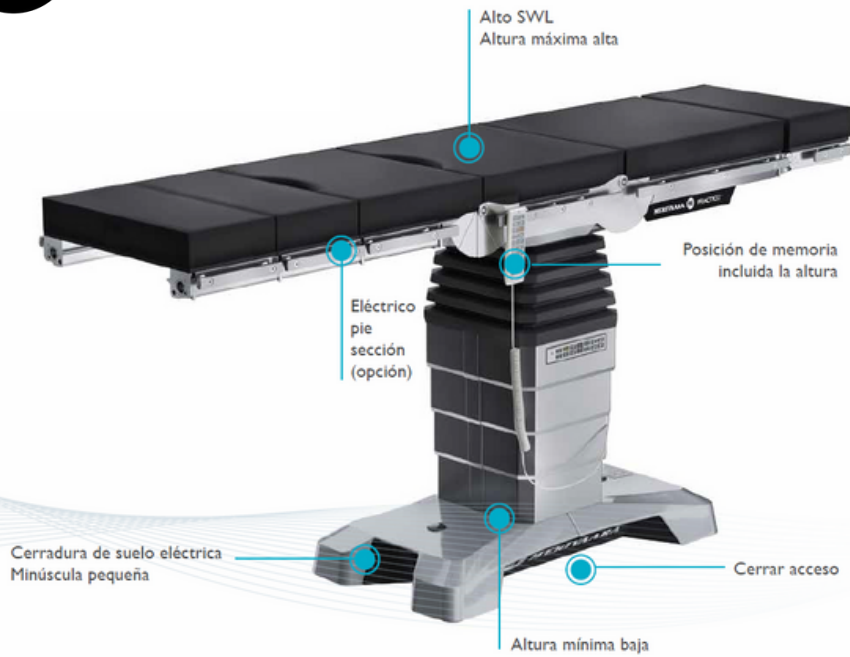

Especificaciones técnicas

| Practico 145000 | Secciones de piernas deslizantes y motorizadas | Sin deslizamiento, secciones de piernas motorizadas | Deslizar, sin secciones de piernas motorizadas | Sin deslizamiento, sin secciones de piernas motorizadas |
|---|--|---|--|---|
| Ángulo de Trendelenburg (grados) | + / - 30 | + / - 30 | + / - 30 | + / - 30 |
| Ángulo de inclinación (grados) | + / - 20 | + / - 20 | + / - 20 | + / - 20 |
| Diapositiva (mm / pulgada) | 390 / 15,6" | - | 390 / 15,6" | - |
| Ángulo de la sección trasera (grados) | + 70 / - 40 | + 70 / - 40 | + 70 / - 40 | + 70 / - 40 |
| Ángulo de las secciones de las piernas motorizadas (grados) | + 70 / - 105 | + 70 / - 105 | - | - |
| Ángulos de las secciones de las piernas no motorizadas (grados) | - | - | + 20 / - 90 | + 20 / - 90 |
| Practico Max Lo height (mm / pulgada) | 540-1030 / 21,3"-40,6" | 553-1043 / 21,8"-41,1" | 540-1030 / 21,3"-40,6" | 553-1043 / 21,8"-41,1" |
| Practico Altura máxima alta (mm / pulgada) | 640-1130 / 25,2"-44,5" | 653-1143 / 25,7"-45" | 640-1130 / 25,2"-44,5" | 653-1143 / 25,7"-45" |
| Practico Altura general (mm / pulgada) | 585-885 / 23"-34,8" | 598-898 / 23,5"-35,4" | 585-885 / 23"-34,8" | 598-898 / 23,5"-35,4" |
| Ancho de la mesa (mm / pulgada) | 540 / 21,3" | 540 / 21,3" | 540 / 21,3" | 540 / 21,3" |
| Número de secciones superiores de la mesa | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| Resistencia mecánica, IEC 60601-2-46 | 616 kg / 1358 libras | 616 kg / 1358 libras | 616 kg / 1358 libras | 616 kg / 1358 libras |
| Capacidad de elevación | 460 kg / 1014.13 libras | 460 kg / 1014.13 libras | 460 kg / 1014.13 libras | 460 kg / 1014.13 libras |
| Número de posiciones de memoria | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Opción de quinta rueda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compatibilidad de infrarrojos con el tipo de Open OR | - | - | - | - |
| Colchón | VEF 80 mm | VEF 80 mm | VEF 80 mm | VEF 80 mm |
| Frenos electricos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funciona con pilas (iones de litio) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compatibilidad estándar con la sección del respaldo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compatibilidad con la sección del respaldo de la silla de playa | - | ✓ | - | ✓ |
| Compatibilidad con la sección posterior Eye-ENT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compatibilidad con la sección posterior del puente renal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |